




De vorm die uw chirurgie vereenvoudigd

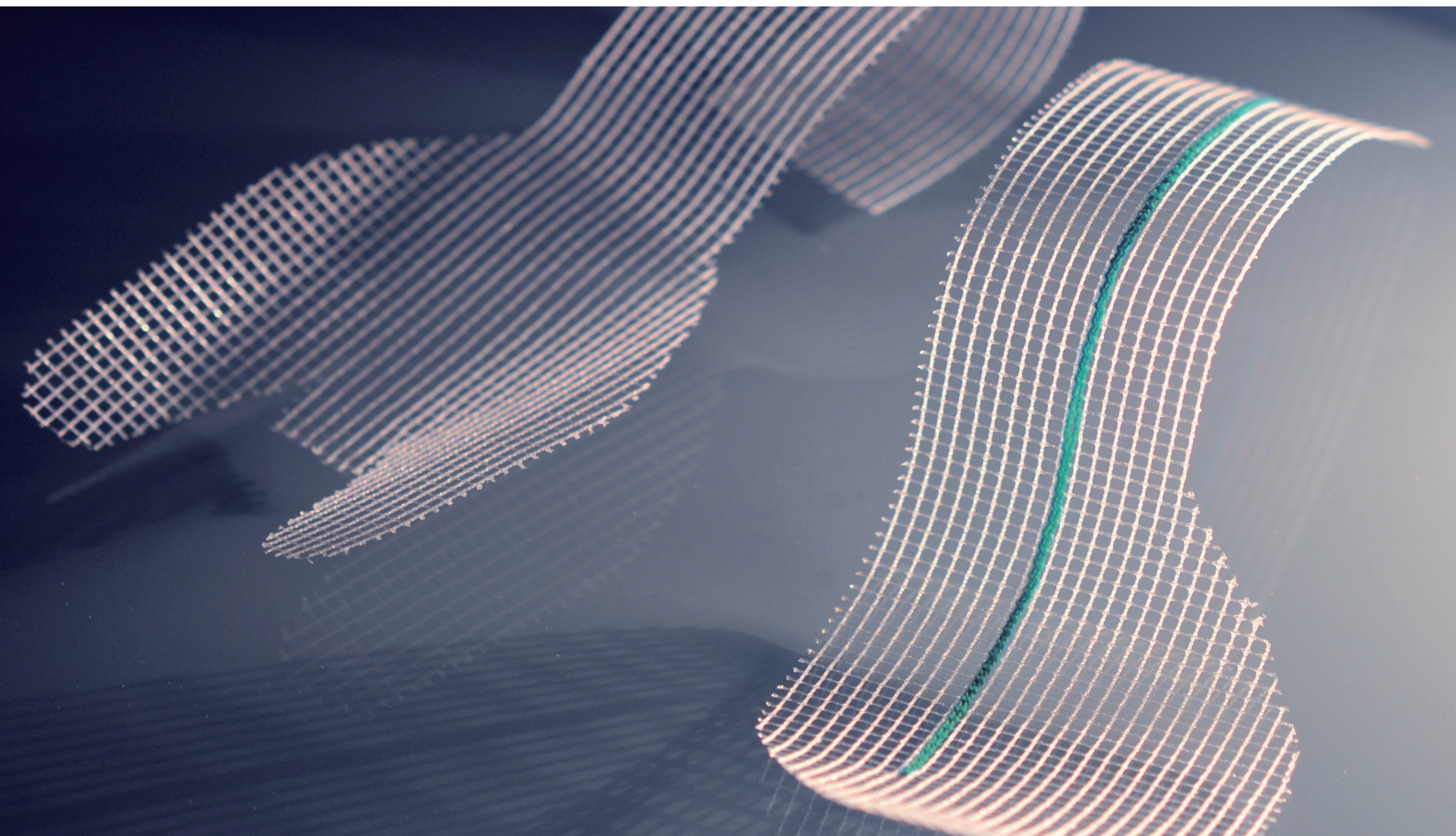

Voor sacropolpexie ontworpen implantaat

Separate spanningsaanpassingen

Geoptimaliseerd patiëntcomfort

DE VORM DIE UW CHIRURGIE VEREENVOUDIGD

SACROMESH is een sacropolplexie mat ontworpen om genitale prolapse te behandelen via een laparoscopische ingreep.

SPEERPUNTEN

Voor sacropolplexie ontworpen implantaat



De Sacromesh is een voorgevormde mat, specifiek ontworpen om zich aan te passen aan de vrouwelijke anatomie. De anterieure mat is eenvoudig te identificeren door de groene draad.

Separate spanningsaanpassingen

De kit wordt geleverd met twee separate matten, bedoeld voor een sacropolplexie. Deze twee separate matten zorgen voor een optimale controle over de spanning voor beide de anterieure en posterieure mat. De matten kunnen ook apart gebruikt worden.

Geoptimaliseerd patiëntcomfort

Sacropolplexie is een minimaal-invasieve chirurgie techniek, waarbij een minimale hoeveelheid materiaal geïmplant wordt. De unieke weeftechniek van de Sacromesh zorgt voor een uitstekende controle en elasticiteit van het materiaal, wat het patiëntcomfort verbeterd.

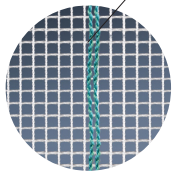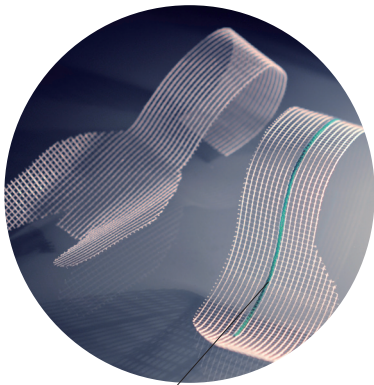

De anterieure mat is te identificeren door de groene draad.



> OMSCHRIJVING

De posterieure mat is speciaal gevormd om eenvoudig op de levator ani spieren geplaatst te kunnen worden. De anterieure mat is gevormd om zijn plaatsing onder de ronde ligament te faciliteren, in het geval van behoud van de uterus. Het vormgeheugen van het materiaal zorgt voor het makkelijk uitrollen van de matten tijdens een laparoscopische ingreep.


> MATERIAAL

- Geweven polypropyleen monofilament
- Macroporeus
- Lichtgewicht ($39 \pm 3 \text{ g/m}^2$)
- Poriegrootte ($1,7 \times 1,7 \text{ mm}$)
- Tussenruimten ($0,005 \text{ mm}^2$)
- Sterkte (20 N/cm)

> EEN IMPLANTAAT ONTWERPEN VOOR DE VROUWELIJKE ANATOMIE

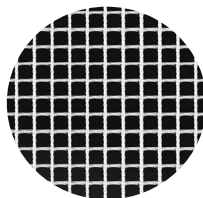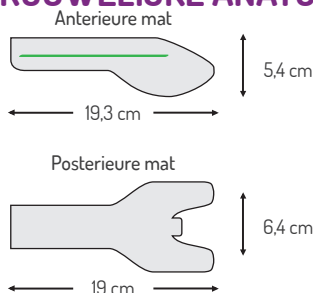

Polypropyleen
Monofilament
Macroporeus

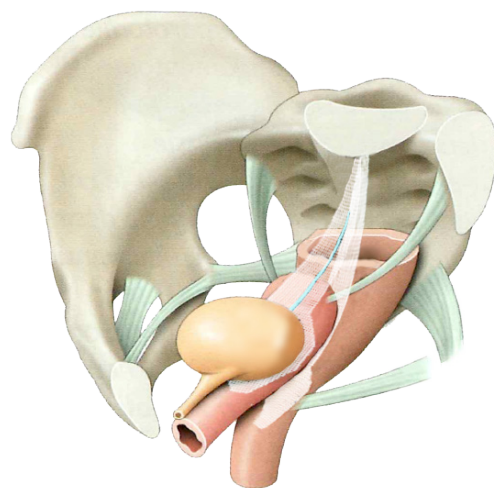

Sacromesh is een Klasse IIb medisch hulpmiddel ontwikkeld door Cousin Biotech s.a.s. (Frankrijk). Het kwaliteitsmanagementsysteem van COUSIN BIOTECH s.a.s. is ISO 13485-gecertificeerd. Bijgeleverde instructies goed lezen. Referentie: FPGSACGB01 - 18/09/15

Specificaties kunnen op elk gewenst moment gewijzigd worden.

Cousin Biotech S.A.S capital : 340 656 € - 398 460 261 RCS Lille - N°TVA FR 34 398 460 261

CE
0120

